

Manuel d'utilisation

Pédalier CYCLER1

Référence :

CYCLER1

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Le mini pédalier est un parfait outil pour tonifier vos bras et vos jambes dans votre maison. Compacte et portable, ce mini pédalier d'exercice trouvera place facilement dans les différentes pièces ou placard de votre maison, ou encore en dessous d'une table ou d'un bureau pour faire vos exercices tout en étant assis. Léger, vous pouvez également le placer sur une table afin de tonifier et fortifier vos bras. Un bouton de réglage vous permettra d'ajuster la résistance à plusieurs niveaux, selon vos exigences. Solide, il est fabriqué en acier robuste.

MONTAGE

- Alignez l'attelle de jambe (A) de manière à ce qu'elles soient en face l'une de l'autre comme indiqué.
2. Glissez l'entretoise (A) dans l'entretoise (B) en alignant les trous pour les boulons.
 3. Insérez les boulons (C) dans les entretoises des jambes et fixez les rondelles concaves (D) et les écrous (E) par le bas. Veillez à ce que les rondelles concaves soient tournées vers le haut, à plat contre le tube.
 4. La tête du boulon doit être correctement positionnée dans la fente prédécoupée de l'attelle de jambe. À l'aide d'une clé ou d'une pince, serrez les écrous du bas jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.
 5. Faites glisser les quatre embouts antidérapants (G) sur les extrémités des jambières jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés. L'utilisation d'une petite quantité de savon liquide facilitera l'application des embouts.
 6. Vérifiez l'équilibre de l'exerciseur à pédales en vous assurant que les quatre embouts antidérapants touchent la surface du sol lorsque l'exerciseur est placé sur la surface du sol.
 7. Si le mini pédalier n'est pas équilibré, (1) vérifiez le serrage des boulons, (2) vérifiez l'alignement des jambières, (3) vérifiez le positionnement des embouts antidérapants.
 8. Insérez le bouton de tension (F) et serrez comme vous le souhaitez


Serrez tous les boulons périodiquement. Les boulons peuvent nécessiter un serrage occasionnel après utilisation.

Les composants métalliques du bouton de tension peuvent devenir chauds lors de l'utilisation.


ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	Attelle de jambe	1
B	Attelle de jambe	1
C	Boulon	2
D	Rondelle	2
E	Écrou	2
F	Bouton de tension	1
G	Embouts antidérapants	4

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce produit peut être utilisé pour exercer les jambes en étant assis sur une chaise. Placez le produit sur le sol à une distance confortable de la chaise - pas trop loin pour provoquer un stress ou un étirement excessif des jambes. Les bras peuvent être exercés en plaçant le produit sur une table. L'utilisateur est assis sur une chaise à la table et saisit avec les mains et fait tourner les pédales avec les mains.

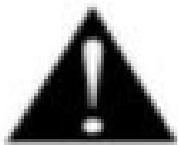

Veuillez inspecter soigneusement toutes les pièces pour détecter les fissures/ruptures avant utilisation

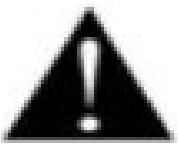

Ne pas se tenir debout sur le produit. Il est conçu pour être utilisé en étant assis sur une chaise.



Les personnes gravement handicapées ou les personnes qui ne peuvent pas marcher sans aide ne doivent pas essayer d'utiliser ce produit sans assistance.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyer le produit avec un chiffon propre. Si le produit devient humide, sécher le immédiatement avec une serviette pour éviter la rouille.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Résistance réglable. Favorise la circulation sanguine. Apporte un maintien musculaire

Matière	Corps en acier et pédale en plastique
Mesures	51 x 41 x 32 cm
Pédale	10,5 x 4 x 2 cm
Poids	2,5 kg

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute pièce cassée en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.